

オラネジ[®] 消毒液1.5%

シール部から外装フィルムを開封する。
 注意：外装フィルムは使用直前まで開封しないこと。



オラネジ[®] 液1.5%消毒用アプリーケーター 10mL・25mL


1 ブリスター包装の開封

ブリスター包装の開封口からシールを
 ゆっくり剥がす。
 注意：ブリスター包装は使用直前まで開封しないこと。



清潔操作による
 受け渡し例

2 薬液容器の開通フォームへの浸透

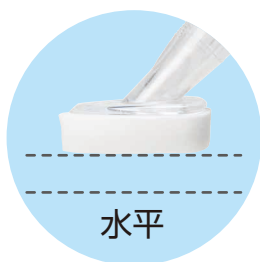

水平



スリーブの先端を押し、薬液容器を開通させる。
 注意：スリーブからの液漏れ、フォームからの液垂れ防止のため、以下を守ること。
 ・薬液がハンドル内からなくなるまでフォーム面を下にし、水平に保持すること。

3 消毒部位に適量を塗布する。



単回使用

アプリーケーターの構造



開通操作時の注意点

フォームを水平に保持しないと薬液が垂れる
 おそれがある。

フォームが水平でないハンドルの把持パターン
 例) フォーム先端を上方に向ける
 ハンドルの把持



例) ハンドルの垂直把持

